

ERVIN DANESH AZMA



ERVIN DANESH AZMA

اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma

خدمات خوب یک اتفاق نیست ✓





BC-2800

Analizador Hematológico Automático



اروین دانشن آزما

Ervin Danesh Azma ✓

✓ خدمات خوب یک اتفاق نیست

BC-2800

Analizador Hematológico Automático

Especificaciones Técnicas

Parámetros

WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT e Histogramas para WBC, RBC, PLT

Principios

Impedancia eléctrica para el conteo WBC, RBC y PLT y para hemoglobina método SFT libre de cianuro

Desempeño

Parámetro	Gama lineal	Precisión (CV%)
WBC(10 ⁹ /L)	0.0-99.9	3(4.0-15.0)
RBC(10 ¹² /L)	0.0-9.99	2(3.0-6.5)
HGB(g/L)	0-300	2(100-180)
MCV(fL)		1(70-100)
PLT(10 ⁹ /L)	0-999	5(200-500)

Volumen de muestra

Prediluida	20 µL
Sangre total	13 µL

Diámetro de apertura

80um

Rendimiento de procesamiento

30 muestras por hora

Pantalla

Pantalla de color LCD
Resolución: 640x480

Arrastre

WBC, RBC, HGB < 0.5%, PLT<1%

Entrada/Salida

RS232x2, impresora paratera (opcional), 1 scanner de código de barras(opcional), 1 interface para teclado

Impresión

Impresora térmica, papel de 50mm de ancho, varios formatos de impresión, impresora externa opcional

Ambiente de operación

Temperatura: 15°C ~30°C
Humedad: 30%~85%

Alimentación

AC 100-240V, 50/60±1Hz

Dimensión

437mm(H) x322mm(W) x386mm(D)

Peso

17.9Kg

اروین دانش آزما
Ervin Danesh Azma

✓ خدمات خوب یک اتفاق نیست







اروین دانش آزما
Ervin Danesh Azma
خدمات خوب یک اتفاق نیست

Ideal para laboratorios pequeños

- Alto desempeño a un precio justo
- Alta exactitud y fiabilidad
- Velocidad de 30 pruebas por hora ideal para laboratorios pequeños
- Tamaño compacto para ahorrar espacio
- Micromuestra y bajo consumo de reactivos, mantenimiento automático todo se suma a la economía

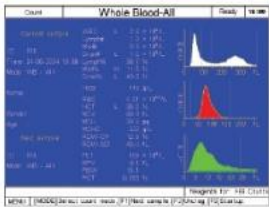

- Amplia pantalla de Color LCD, 19 parámetros y 3 histogramas en una pantalla

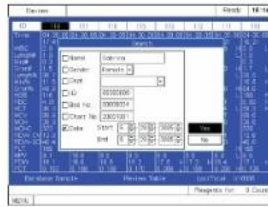


- Función comprehensiva de búsqueda de datos de paciente



- Multi formatos programables en impresión, enorme almacenamiento de 10,000 resultados de paciente con histogramas
- Multiple acceso para entrada de dato por teclado, o escáner de código de barras (opcional)




- Calibración completamente automática incluyendo un programa de calibración con sangre fresca

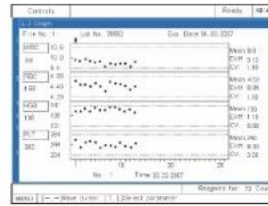

- Programas de QC incluyendo análisis L-J y X-B; Hasta 9 archivos de control-31 pruebas/archivo



- Quemado de apertura y lavado prueba por prueba evitan problemas con coágulos
- Limpieza interna y externa de sonda automática
- Mantenimiento diario automático incluyendo prueba de conteo de fondo

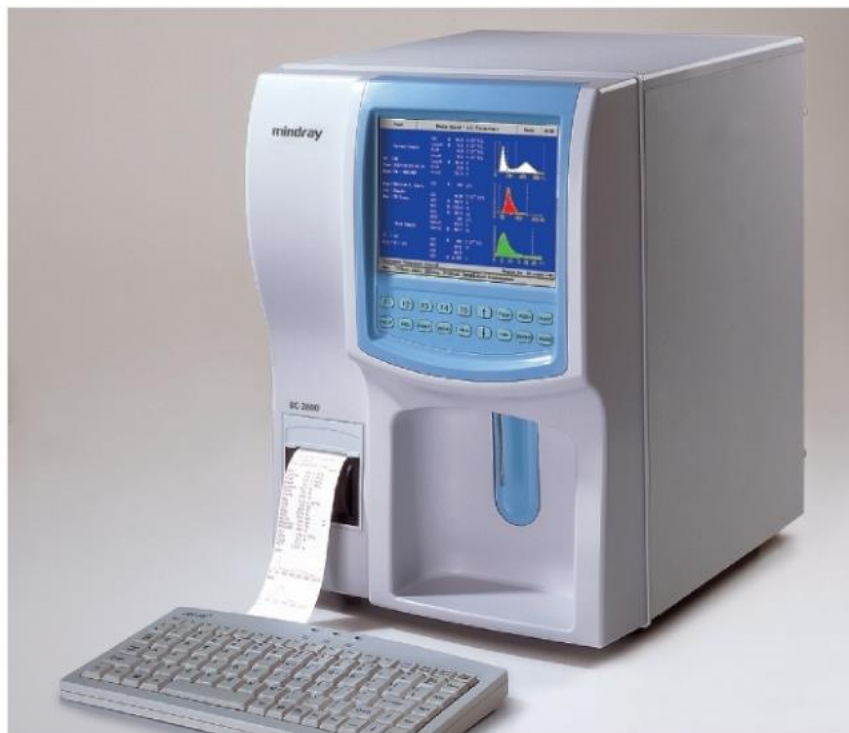

- Completamente automático, compacto, flexible y costo efectivo
- Diferencia la población leucocitaria en tres grupos
19 parámetros+3 histogramas
- Capacidad de procesamiento: 30 muestras/hora
- Almacena hasta 10, 000 resultados incluyendo histogramas
- Método de análisis de HGB libre de cianuro
- 3 modos de conteo: Todos los parámetros, WBC/HGB, RBC/PLT
- Impresora térmica interconstruida e impresora externa opcional
- Amplia pantalla de color LCD



اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma

خدمات خوب یک اتفاق نیست ✓

اروین دانش آزما

Ervin Danesh Azma



021_62999800

09100145015_18



CO.ERVINDANESHAZMA



WWW.ERVINDANESHAZMA.COM